



ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


LABNET WEBLIS

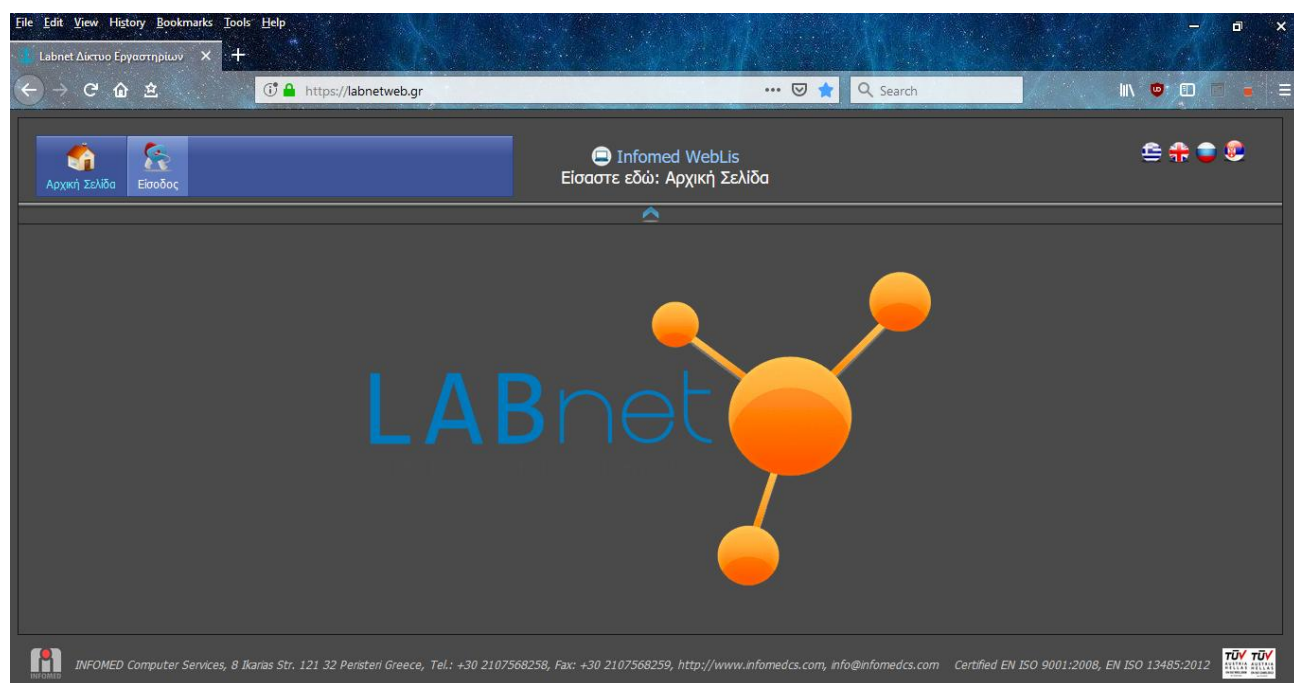

Για την είσοδο στην διαδικτυακή πλατφόρμα των εργαστηρίων της Labnet επιλέγουμε το εικονίδιο LABNET WEBLINK στην ιστοσελίδα www.labnet.gr ή πληκτρολογούμε απευθείας τη διεύθυνση <https://labnetweb.gr>.

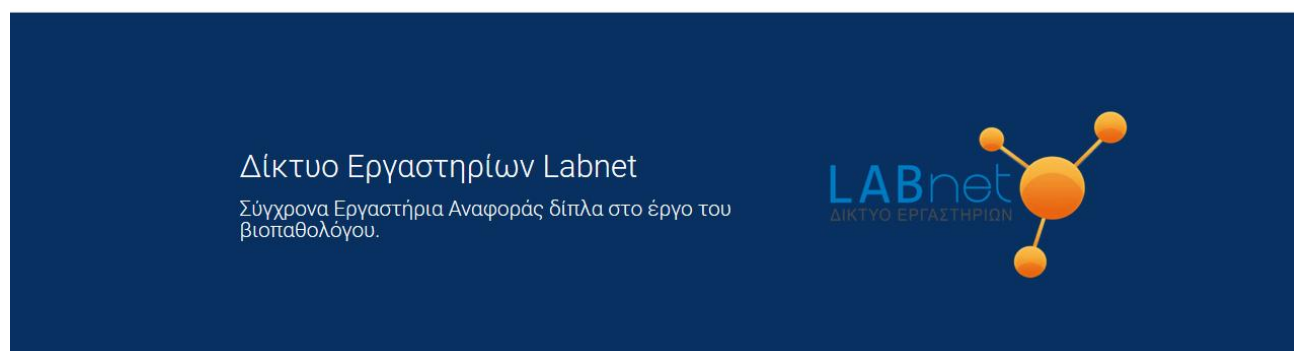

Κάνουμε κλικ στο Είσοδος.

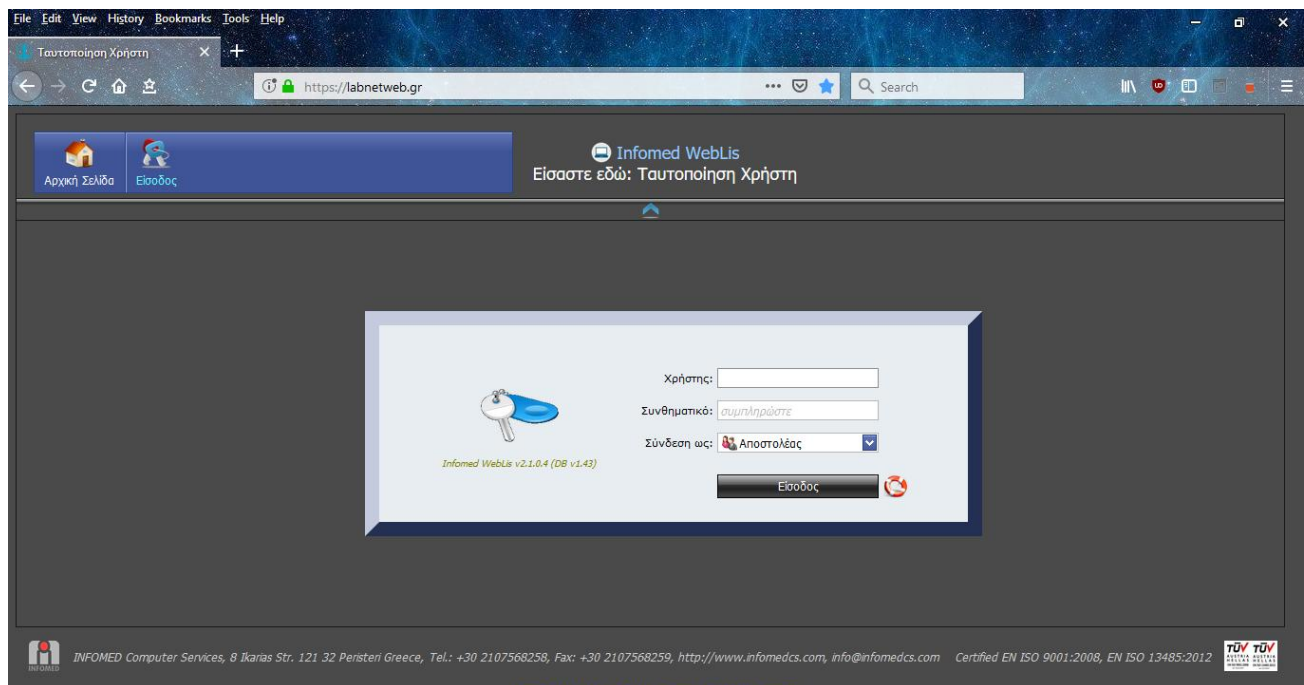


Στα Όνομα Χρήστη και Συνθηματικό πληκτρολογείτε τους κωδικούς που σας έχουν δοθεί από τη Labnet. Στο Σύνδεση ως αφήνουμε το Αποστολέας.

Οι κωδικοί είναι της μορφής

Όνομα Χρήστη W-XXX

Συνθηματικό XXX

Και επιλέγουμε Είσοδος

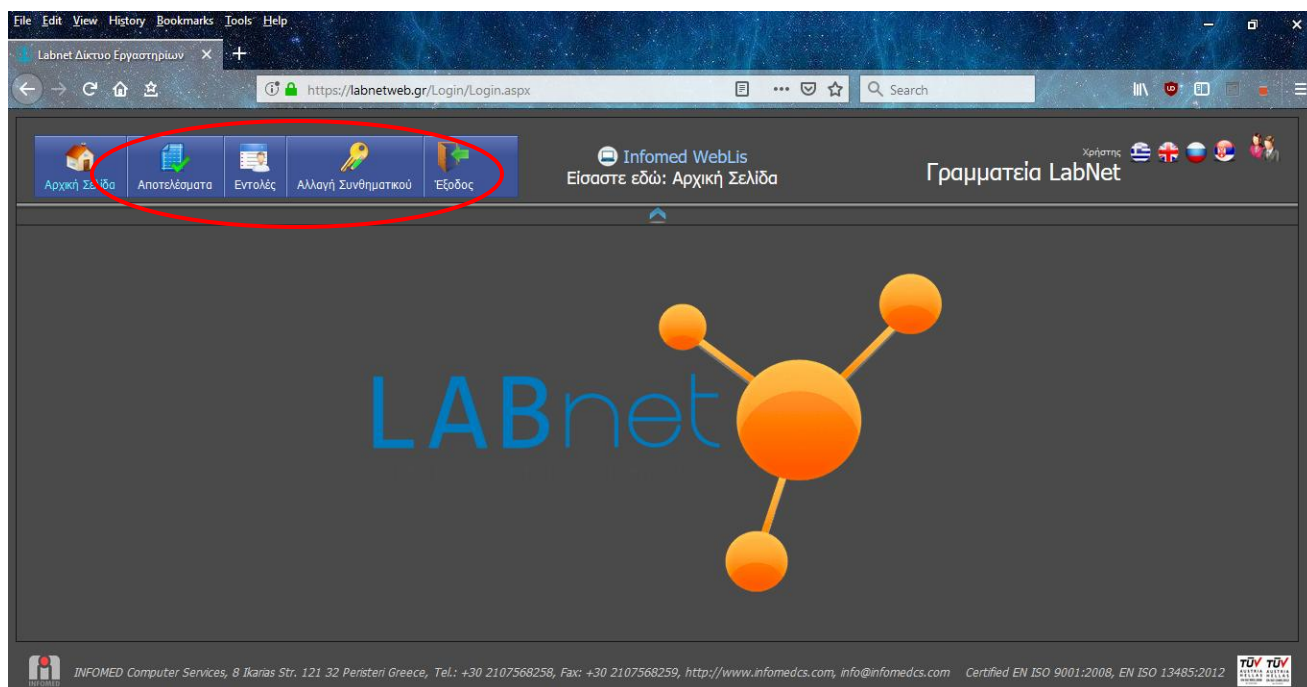

Το πρόγραμμα αποτελείται από 2 κύρια μενού. Το μενού των **Αποτελεσμάτων** και το μενού των **Εντολών**. Στο μενού **Αλλαγή Συνθηματικού** μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης στο WebLis.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Στο μενού των Αποτελεσμάτων βλέπετε σε πραγματικό χρόνο τις εντολές μόλις καταχωρηθούν στο εργαστήριο και τα αποτελέσματα των εξετάσεων μόλις γίνει η επιβεβαίωσή τους από το εργαστήριο. Αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα η εντολή θα εμφανίζεται με εξετάσεις που θα γράφουν **Εκκρεμεί αποτέλεσμα** και θα είναι με κίτρινο-πορτοκαλί επικεφαλίδα, ενώ όταν ολοκληρωθεί θα χρωματίζεται πράσινη.

01987631 (ΣΤΑΜΑΤ. ΕΥ)
01987630 (ΡΟCΙ ΑΣΤΡΙ)
01987629 (ΡΟCΙ ΑΝΙΛΑ)
01987628 (ΠΑΛΛ. ΑΦΙ)
ΛΙΟΛΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΙΑ *ΕΚΤ
739649 (ΤΖΩΠΙΑΚΗ ΙΩΑΝ)
1262438 (6)
1262443 (5)
1262440 (3)
1262439 (2)
1262441 (1)
01604117 (ΓΑΡΟΦΑΛΟ)
ΣΑ - 01986305^1 (01986305)

01/11/2018: ΛΑΡΙΣΑ - 01986305^1 (01986305)
ΟΛΑ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ)

Εξέταση	Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες	Σχόλια	Τιμές Αναφοράς
TRF	Σιδηροφωσφίνη (Τρανσφαιρίνη)	260	mg/dL		14 - 60 ετών: 180 - 382 60 - 80 ετών: 173 - 360
ACE	Μετατρεπτικό Ένζυμο Αγγιοτενσίνης (ACE)	52.9	U/L		20.0 - 57.0* *Νέες αναθεωρημένες τιμές αναφοράς
NH3	Αμμωνία (NH3)	Εκκρεμεί Αποτέλεσμα...	μg/dL		30 - 86
SERPLASH	Σερουλοπλάσμίνη	31.0	mg/dL		20 - 60


Σελίδα 1 από 4 (26 παράμετροι) Εγγραφές ανά Σελίδα: 8

01/11/2018: ΛΑΡΙΣΑ - 01986305^1 (01986305)
ΟΛΑ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ)


Εξέταση	Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες	Σχόλια	Τιμές Αναφοράς
FERR	Φερριτίνη	6.29	ng/mL		7 - 140
TSH	Θυρεοτρόπος Ορμόνη (TSH)	1.792	μIU/mL		0.700 - 4.200 (Ενδοεπικτικές τιμές)* *CALIPER Database
Anti-TPO	Anti-TPO	0.10	IU/mL		< 15.00* *Νέες αναθεωρημένες τιμές αναφοράς

Σελίδα 1 από 1 (3 παράμετροι) Εγγραφές ανά Σελίδα: 8

Μπορούμε και από τα φίλτρα αναζήτησης στο **Κατάσταση Εντολής** να επιλέγουμε τις μόνο Ολοκληρωμένες εντολές ή τις μόνο Σε Εξέλιξη ή και Όλες.

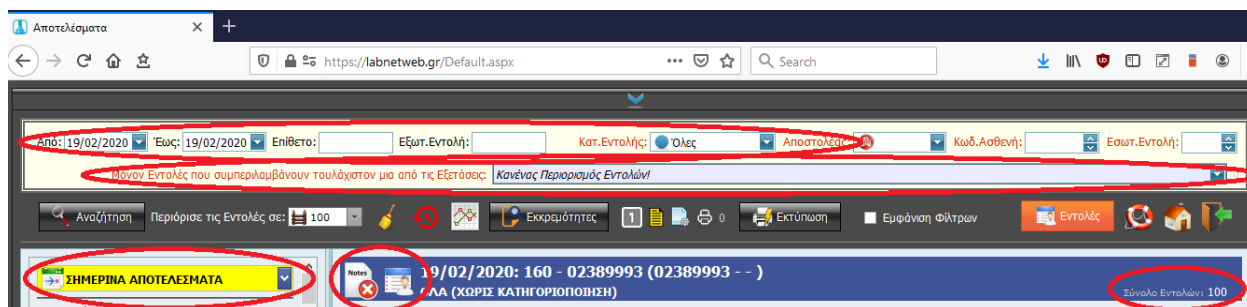




Τα φίλτρα που περιλαμβάνονται στο μενού των Αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τα γρήγορα φίλτρα (σε κίτρινο πλαίσιο) ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 10ημερου, επιλογή ανά καθορισμένο διάστημα (Από – Έως), το Επίθετο (το ονοματ/μο ή κωδικό του ασθενούς) και τον αριθμό Εξωτερικής εντολής (ο αριθμός του παραπεμπτικού ή κωδικός της ηλεκτρονικής καταχώρησης). Το εικονίδιο Notes επισημαίνεται με πράσινο όταν υπάρχουν παρατηρήσεις για τη συγκεκριμένη εντολή (π.χ. ημερομηνία παράδοσης αποτελέσματος).

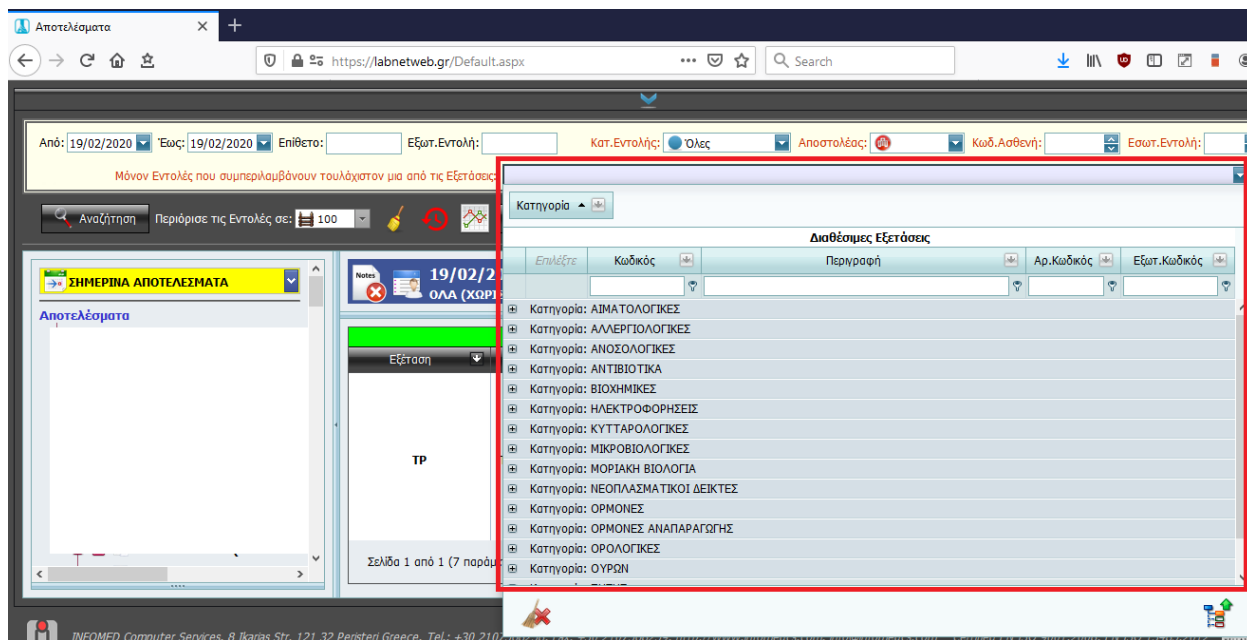

Επιπλέον, μπορείτε από το φίλτρο Μόνον Εντολές που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία από τις Εξετάσεις να κάνετε επιλογή εντολών με βάση το είδος των εξετάσεων και να βλέπετε μία συνολική εικόνα (π.χ. των εξετάσεων που στέλνονται ανά μήνα) από το Σύνολο εντολών στα δεξιά.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Για να πάμε στο μενού των Εντολών επιλέγουμε το **Εντολές** από το αρχικό μενού ή και από το δεξί μέρος στο μενού των Αποτελεσμάτων.

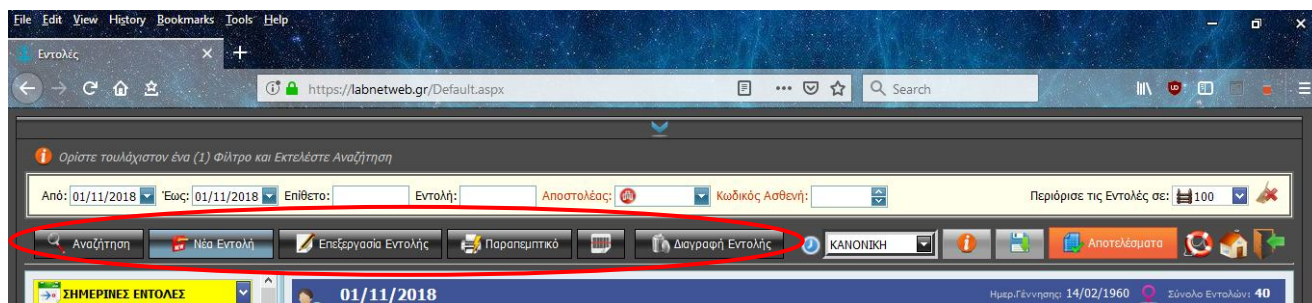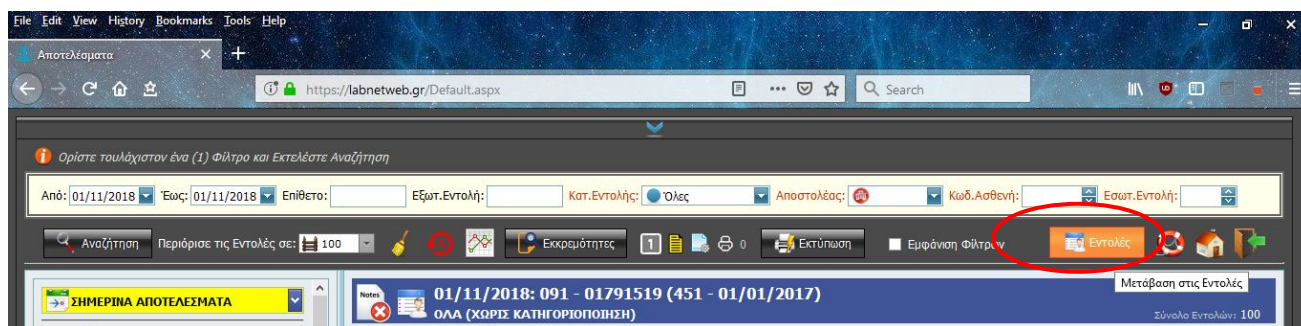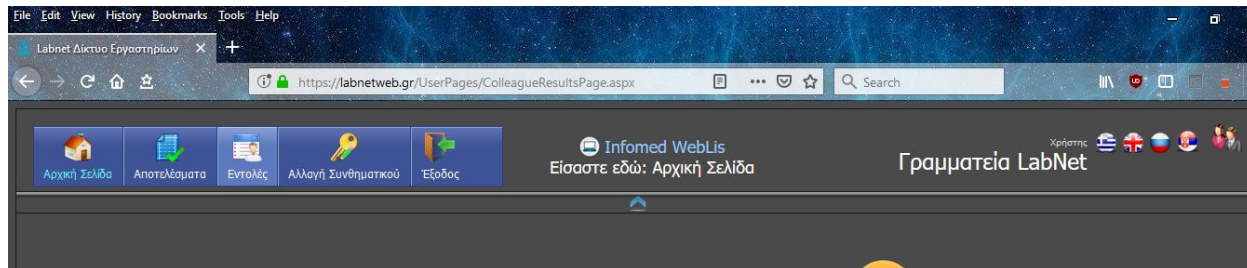

Στο μενού των Εντολών μπορούμε να καταχωρήσουμε ηλεκτρονικά εντολές ασθενών με τις εξετάσεις τους, να εκτυπώσουμε e-Παραπεμπτικό και barcode δείγματος. Επειδή για λόγους ασφαλείας το WebLis δεν έχει απευθείας πρόσβαση στη βάση δεδομένων μας οι εντολές που καταχωρούνται ηλεκτρονικά καταγράφονται σε ενδιάμεσο πίνακα και μόνο όταν παραλάβουμε και σκανάρουμε το barcode του δείγματος θα δημιουργηθεί νέα καταχώρηση στη βάση δεδομένων μας, θα γίνει χρέωση και θα εμφανίζεται η εντολή και στο μενού των Αποτελεσμάτων. Έτσι ελέγχει και το εργαστήριο ότι όλα τα δείγματα παραλήφθηκαν κανονικά (βλέπε και σελίδα 10).

Για τη δημιουργία νέας εντολής επιλέγουμε το Νέα Εντολή και ανοίγει το παράθυρο για την εισαγωγή των δημογραφικών δεδομένων.

Τα κενά πεδία Επίθετο, Όνομα κτλ που υπάρχουν χρησιμεύουν για την αναζήτηση δημογραφικών από προηγούμενη καταχώρηση του ίδιου ασθενούς ώστε να γίνει συσχετισμός και δημιουργία ιστορικού στις εξετάσεις του. Όμως πια λόγω GDPR στο εργαστήριο αναφοράς όλες οι εντολές στέλνονται κωδικοποιημένες και επομένως θεωρούνται όλες ως Νέα Εντολή.

Για Δημιουργία Νέου Ασθενή (εντολής) επιλέγουμε το κόκκινο εικονίδιο New και ανοίγει μία τρίτη σειρά για την εισαγωγή των δημογραφικών στοιχείων της εντολής. Απαραίτητα στοιχεία εκτός από το Επίθετο (κωδικός ασθενούς) είναι το φύλο και η ημερομηνία γέννησης (ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ορμονολογικές εξετάσεις ή εξέταση παιδιών).

Επιλέγοντας τη δισκέτα αριστερά αποθηκεύουμε τα στοιχεία της εντολής. Επιλέγουμε τη νέα καταχώρηση και κάτω δεξιά το Εφαρμογή.

Δημιουργία Νέας Εντολής

Εντολή Ασθενή ☒ Ανώνυμη Εντολή ☐

Επίθετο: Όνομα: Εξωτ.Κωδικός Ασθενή: Αναζήτηση

Ενέργεια	Επίθετο	Όνομα	Πατρώνυμο	Εξωτ.Κωδ.Ασθεν	Ημ.Γέννησης	Φύλο	Τηλέφωνο
	TEST			SYS-221177		Ανδρας	
	TEST			SYS-243600	10/01/2011	Ανδρας	

Σελίδα 1 από 1 (2 ασθενείς) Ασθενείς ανά Σελίδα: 7

Εξωτ.Κωδικός Εντολής: 002750004518 Αποστολέας: ANEY

Ανυπατοληγία: 01/11/2018 20:39 Σημειώσεις:

Κλινικό Ιστορικό: Σημειώσεις Εντολής:

Εξόδος Ο HIS Κωδ.Εντολής είναι ΜΟΝΟΔΙΚΟΣ!

Στη συνέχεια κλείνει το παράθυρο των δημογραφικών στοιχείων και επιστρέφουμε στο παράθυρο της Παραγγελίας. Παραγγελία εξετάσεων μπορούμε να κάνουμε είτε από την καρτέλα Παραγγελία κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ανάμεσα στα δύο κόκκινα εικονίδια New είτε επιλέγοντας εξετάσεις από το Πάνελ Εξετάσεων, όπου οι εξετάσεις είναι κατηγοριοποιημένες με βάση τη σειρά τους στα παραπεμπτικά.

Επίθετο: Εντολή: Αποστολέας: Κωδικός Ασθενή: Περίοδος τις Εντολές σε: 100

Επεξεργασία Εντολής Παραγγελιακό Διαγραφή Εντολής ΚΑΝΟΝΙΚΗ Αποτέλεσμα

01/11/2018 548 - 002220004511 (ΣΙΑ. ΤΡΙΑΝ. 19) Ημερ.Γέννησης: 14/02/1960 Σύνολο Εντολών: 40


Παραγγελία Πάνελ Εξετάσεων

Κατηγορία:


Διαθέσιμες Εξετάσεις

Επιλέξτε	Κωδικός	Περιγραφή	Αρ.Κωδικός	Εξωτ.Κωδικός
☒		Κατηγορία: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ		
☐		Κατηγορία: ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΕΣ		
☐		Κατηγορία: ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ		
☐		Κατηγορία: ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ		

Ακύρωση Προσθήκη

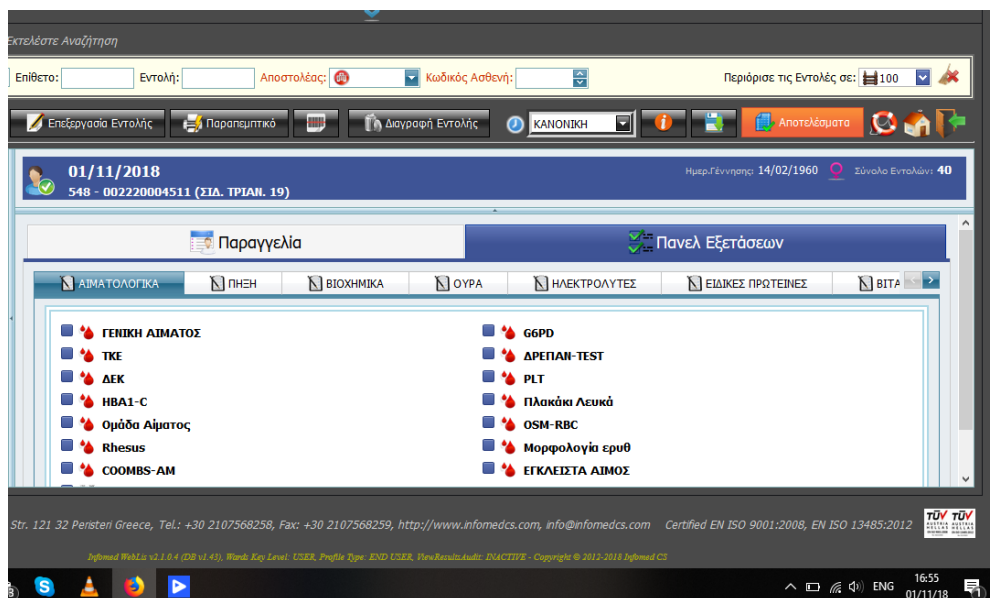

Η αποθήκευση γίνεται αυτόματα όταν μεταβούμε στην καρτέλα Παραγγελία. Οι εξετάσεις εμφανίζονται με το υλικό που χρειάζεται.


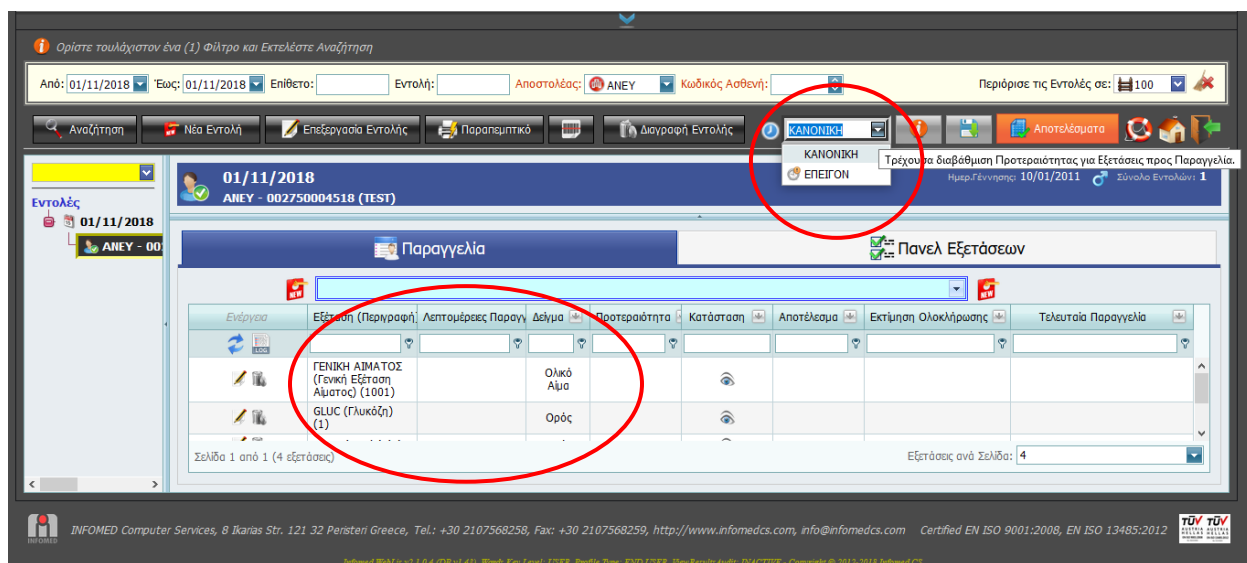


Στο πεδίο Λεπτομέρειες Παραγγελίας μπορούμε να γράψουμε ηλεκτρονικά οποιαδήποτε παρατήρηση (π.χ. όγκος ούρων, είδος καλλιέργειας κτλ) θα σημειώναμε για την εξέταση στις Παρατηρήσεις στο παραπεμπτικό και η οποία θα εκτυπωθεί και στο e-Παραπεμπτικό. Εξετάσεις που δεν μπορούμε να βρούμε ή οποιαδήποτε παρατήρηση υπάρχει μπορούμε να σημειώσουμε και χειρόγραφα στο e-Παραπεμπτικό. Επιπλέον, μπορούμε να ορίσουμε και το δείγμα ως Επείγον.


Μόλις γίνει παραλαβή του δείγματος στο εργαστήριο της Labnet αλλάζει η κατάσταση της εντολής από **Σε Αναμονή για αποδοχή (μάτι)** σε **Αποδεκτή εξέταση (λουκέτο)**.


Όταν η εντολή είναι **Σε Αναμονή για αποδοχή (μάτι)** μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στα δημογραφικά ή τις εξετάσεις ή και πλήρη διαγραφή της εντολής.

Όταν όμως το δείγμα παραληφθεί από το εργαστήριο της Labnet και γίνει **Αποδεκτή εξέταση (λουκέτο)**, τότε για λόγους ασφαλείας (αποτροπή απομακρυσμένης πρόσβασης σε βάση δεδομένων που αφορούν ιατρική πληροφορία) η όποια τροποποίηση χρειαστεί να γίνει θα γίνεται μόνο τηλεφωνικά.

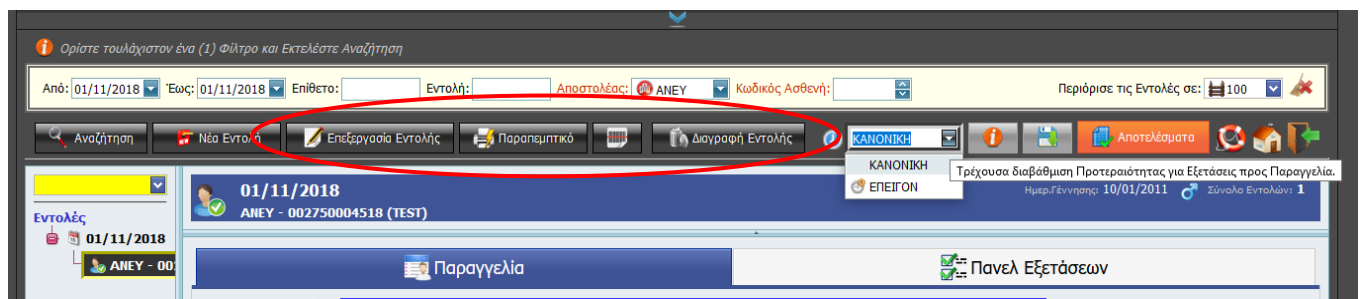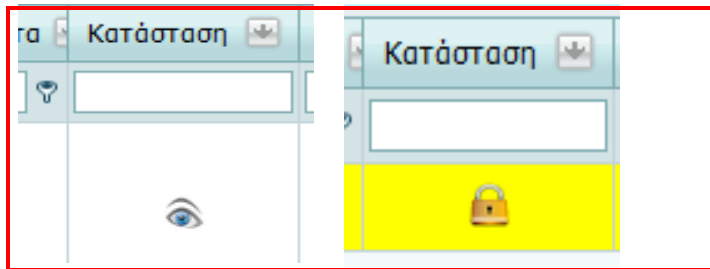

Από το **Παραπεμπτικό** μπορούμε να εκτυπώσουμε το e-Παραπεμπτικό στην αναλυτική μορφή που περιλαμβάνει τις εξετάσεις ή τη συνοπτική (επιλέγοντας τη **Λίστα**) που περιέχει μόνο τα δημογραφικά δεδομένα χωρίς τις εξετάσεις.

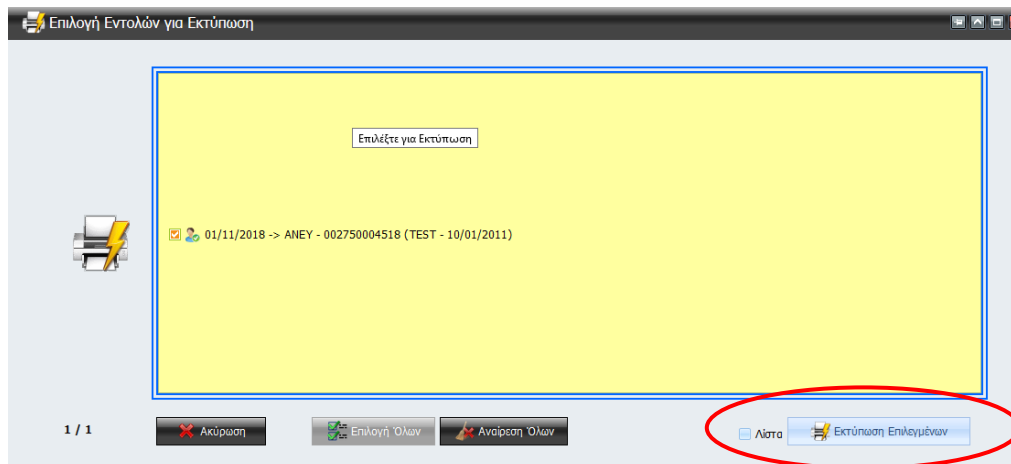

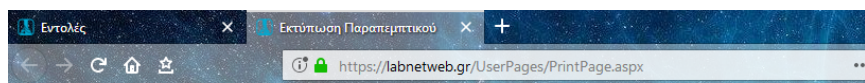

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ



Αποστολέας: ANEY
Κωδ. Αποστολέα: ANEY
Κωδικός Εντολής: 002750004518
Ημερομηνία Εντολής: Thu 1 Nov 2018
Κατάσταση Εντολής: 01/11/2018 20:39:00
Δειγματοληψία: 20:39:00
Σχόλια Εντολής:

Όνομα: TEST
Πατρώνυμο: TEST
Επίθετο: TEST
Ημ.Γέννησης: 10/01/2011


Απαιτούνται τα παρακάτω δείγματα:

Ολικό Αίμα,
Ορός

Εξέταση (Συντόμηση)	Λειτουργίες	Δείγμα	Ποσότητα (μl) *
Γενική Εξέταση Αίματος (ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ)		Ολικό Αίμα	500
Γλυκόζη (GLUC)		Ορός	5
Ουρία (UREA)		Ορός	5
Ουρικό Οξύ (UA)		Ορός	10

* Πρέπει να υπολογισθεί και επιπλέον νεκρός όγκος 200μl

Εξετάσεις για 4 Παραληφθέντες Εξετάσεις: 0 Εξετάσεις Εντολής: 4

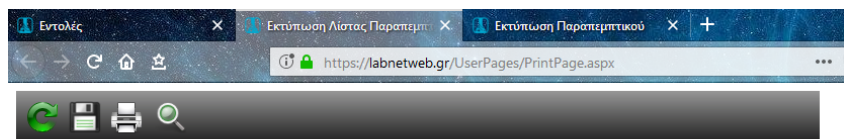

LABNET I.A.E.
Αγίου Δημητρίου 161, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 54638
Τηλ: +30 2310 916180 - Φαξ: +30 2310 916171
e-mail: info@labnet.gr / www.labnet.gr

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Αποστολέας: ANEY
Κωδ. Αποστολέα: ANEY
Κωδικός Εντολής: 002750004518
Ημερομηνία Εντολής: Thu 1 Nov 2018
Κατάσταση Εντολής: 01/11/2018 20:39:00
Δειγματοληψία: 20:39:00
Όνομα: TEST
Πατρώνυμο: TEST
Επίθετο: TEST
Ημ.Γέννησης: 10/01/2011
Σχόλια Εντολής:




Απαιτούνται τα παρακάτω δείγματα:

Ολικό Αίμα,
Ορός

Μόλις ανοίξει η καρτέλα με τα παραπεμπτικά επιλέγουμε το Εκτύπωση από Adobe Reader στο εικονίδιο του εκτυπωτή και στη συνέχεια επιλέγουμε τον εκτυπωτή μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Την πρώτη φορά μπορεί ο πλοηγός να μην ανοίξει νέα καρτέλα και να εμφανίσει μήνυμα σχετικά με την αποτροπή δημιουργίας νέων παραθύρων από το labnetweb.gr. Στην περίπτωση αυτή κάνοντας κλικ στο μήνυμα επιλέγουμε Να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από το labnetweb.gr και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία.

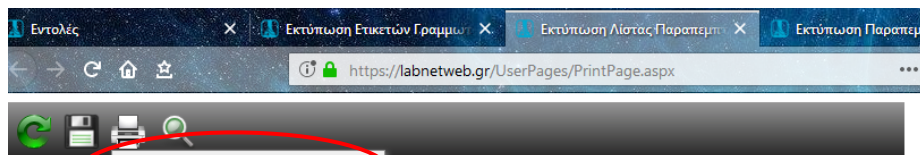

LABNET I.A.E.
Αγίου Δημητρίου 161, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 54638
Τηλ: +30 2310 916180 - Φαξ: +30 2310 916171
e-mail: info@labnet.gr / www.labnet.gr


ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ



Αποστολέας: ANEY
Κωδ. Αποστολέα: ANEY
Κωδικός Εντολής: 002750004518
Ημερ/νία Εντολής: Thu 1 Nov 2018
Δειγματοληψία: 01/11/2018 20:39:00
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Επίθετο: TEST
Ημ.Γέννησης: 10/01/2011
Σχόλια Εντολής:



Απαιτούνται τα παρακάτω δείγματα:
Ολικό Αίμα,
Ορός

Από το Εκτύπωση Ετικετών γραμμωτού κώδικα (κουμπί δίπλα στο Παραπεμπτικό) μπορούμε να εκτυπώσουμε το barcode του δείγματος με βάση τα υλικά που χρειάζονται.

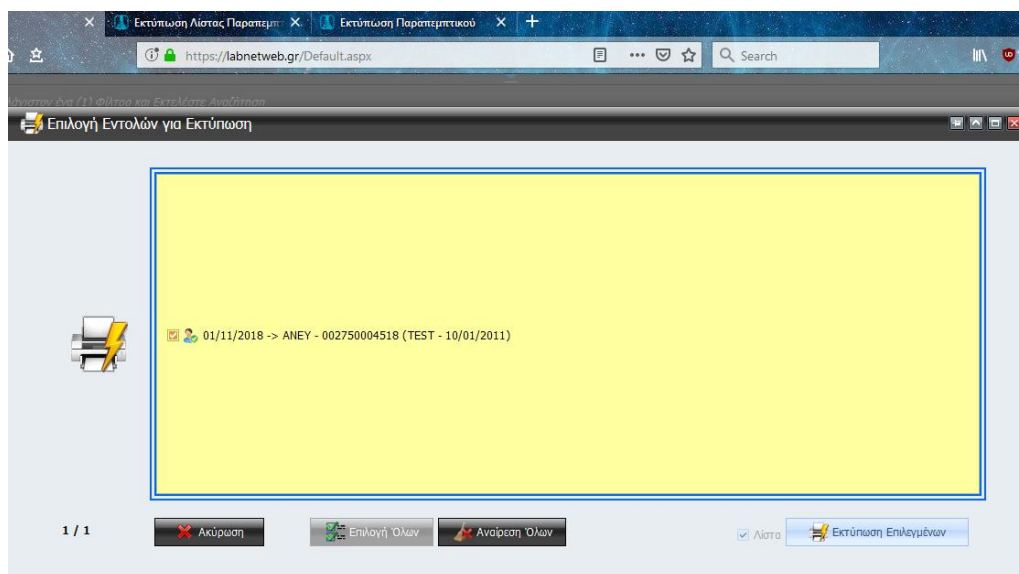

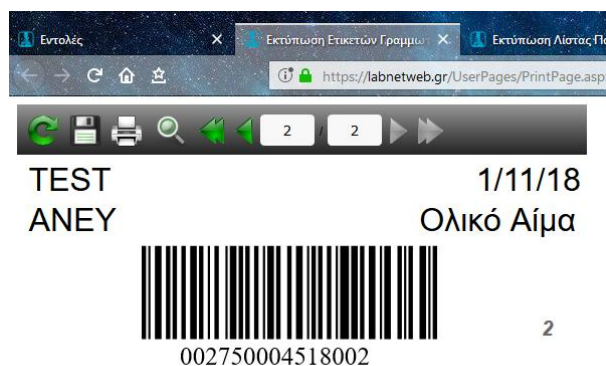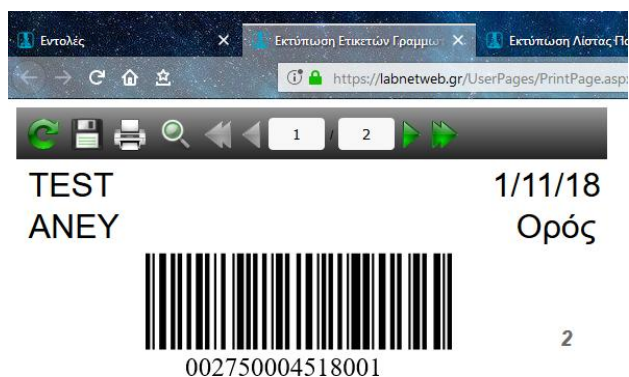

Μόλις ανοίξει η καρτέλα με τα barcodes επιλέγουμε το **Εκτύπωση από Adobe Reader** στο εικονίδιο του εκτυπωτή και στη συνέχεια επιλέγουμε τον barcode εκτυπωτή μας. Η προεπιλεγμένη διάσταση barcode είναι 50X20 mm. Επιπλέον διαθέσιμες διαστάσεις barcode είναι 50X25 mm και 45X35 mm.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Την πρώτη φορά μπορεί ο πλοηγός να μην ανοίξει νέα καρτέλα και να εμφανίσει μήνυμα σχετικά με την αποτροπή δημιουργίας νέων παραθύρων από το labnetweb.gr. Στην περίπτωση αυτή κάνοντας κλικ στο μήνυμα επιλέγουμε Να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από το labnetweb.gr και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία.

